

# これからの未来を 形にする ミリングマシン



## PrograMill® PM7


デジタルな未来のための  
充実した設備  
プログラミル PM7

## 5つの特徴

- ✓ 湿式・乾式自動切り替え
- ✓ イオナイザー & 自動清掃機能搭載 (Active Air Suction)
- ✓ 最大8枚のディスクまたは、48個のキャドブロックの装填が可能
- ✓ 970W高出力スピンドルによる安定した切削
- ✓ タッチパネルによる視覚的なインターフェース

### ハイクオリティ&効率的なミリング

8枚のディスクまたは、48個のキャドブロックの装填が可能。湿式・乾式および、セッティングされた最大20本のツールを自動で切り替えながら個々の作業が適切に選択されます。

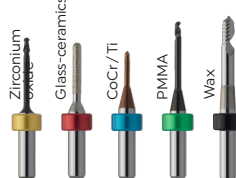

### クリーンな作業環境を維持

吸気の気流を制御し、チャンバー内に、切削くずが溜まらないようにする機能が搭載されています (Active Air Suction)。静電気の発生を抑制するイオナイザーとともに、クリーンな切削環境を維持することで、機械のメンテナンスが容易になります。



### 視覚的なインターフェース

タッチパネルによる、視覚的な操作が行えます。切削の進捗状況や、ツールの消耗などもこの画面で確認することができ、とても便利です。



### プログラミル

総重量：約 413.5 kg

PM7	D×W×H(mm)	694×979×792
	重量	210 kg
	加工方式	湿式・乾式
	加工軸	同時5軸
	ディスク装填数	8
	ミリングバー収容数	20
ベース	スピンドル出力	970 W
	スピンドル回転数	60,000 rpm
	D×W×H(mm)	750×980×930
コンプレッサー	重量	135 kg(ベースのみ)
	吐出し空気量	約 68.5 kg(アクセサリ) (サクションユニット、タンク等)
コンプレッサー	重量	約 68.5 kg(アクセサリ) (サクションユニット、タンク等)
	吐出し空気量	205 L /min

### 加工可能な材料

チタン / コバルトクロム / ジルコニア / ガラスセラミックス / ハイブリッドレジン / PMMA / ワックス

### 製品内容

プログラミル PM7	689240WW	1 セット	プログラミル CAM RFIDリーダーセット	691953	1 セット
プログラミル ベース セット	689970WW	1 セット	プログラミル CAM PC	691691EN	1 セット

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット / 販売名：プログラミル PM7 / 届出番号：13B1X10049IVEPM7 / 一般医療機器

Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目28番24号  
TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657

ivoclar.com