

歯質も補綴物も ワンランク上を目指す 優しいケア

Proxyt®

歯面研磨ペースト
プロキシット


クリーニングと研磨の効率化

新しくなったプロキシットは、操作性が向上したことでクリーニングおよび研磨が楽になりました^[5]。天然歯、IPS e.max等の修復物、インプラントを効率的かつ効果的にクリーニング・研磨し、自然な光沢を維持するのに役立ちます^[1-5]。最細粒のピンク Fineは、象牙質、エナメル質だけでなく、コンポジットレジンやセラミックス修復物の表面にも優しく作用します^[1-7]。

- ✓ 3種類の粗さおよび選べるフッ化物無配合による、治療への柔軟性
- ✓ ピンク Fineのやさしい研磨による、光沢維持[1-6]
- ✓ より滑らかに、より飛び散りにくく、楽で効率的なクリーニングと研磨が可能 [5]



平滑な歯面がプラークの付着を抑える

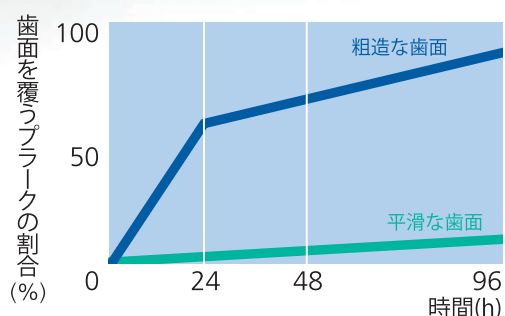

Quirynen et al.1988

[1] Sarembe S et al, Study Report, Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems IMWS, 2020.
[2] Kanat-Erturk B, Color Stability of CAD/CAM Ceramics Prepared with Different Surface Finishing Procedures. J. Prosthodont, 2019.
[3] Barbisch M, Test Report, Ivoclar Vivadent AG, 2019.
[4] Lendenmann U, Test Report, Ivoclar Vivadent AG, 2019.
[5] Hu M, Test Report, Ivoclar Vivadent AG, 2020.
[6] Liebermann A et al., Nine prophylactic polishing pastes: impact on discoloration, gloss, and surface properties of a CAD/CAM resin composite. Clin Oral Investig, 2019, 23(1): p. 327-335.
[7] Sheets CG and Paquette JM, Postorthodontic restoration of enamel surface characteristics. Signature, 1997, 4(3): p. 1-3.

プロキシット 使い切り1回パック

最細粒のピンク Fine および最大粒のブルー Coarse は、1回ごとの使い切りパックもあります。1回パックは、歯科医師・歯科衛生士が求める衛生的で素早い治療を可能にします。

NEW

- ✓ 新鮮なペーストを使用できる衛生的な治療
- ✓ カップがスポットはまるプロフィーリングの使い勝手の良さ
- ✓ 2種類の粗さによる、治療への柔軟性



プロフィーリング



フッ化物配合ペーストはお子様にも使用できる
500ppm



飛び散りを最小限に抑えるよう改良

歯面や修復物の傷つきを最小限に抑えるやさしい研磨力 プロキシット ピンク Fine



PMTCの最終仕上げとして

インプラントケアにも

インプラントのヒーリングキャップや
アバットメントも優しくケアできます。




キシリトールを含有


爽やかなミント味



コンポジットレジン

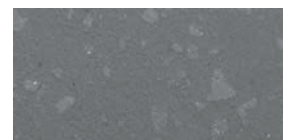

コンポジットレジン研磨後
プロキシット F (ピンク)

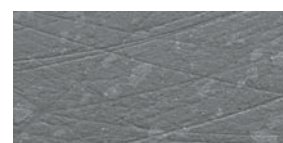

細粒子研磨後 (プロキシット以外)

SEM, mag = 200x
(Ivoclar Vivadent, R&D 2013)

Q1: PMTCペーストを選ぶポイントは何ですか？

A1: 私は①歯面にやさしい、②フッ素の含有、③味、④操作性 (ペーストのなめらかさ) です。

Q2: PMTCペーストの味にこだわる理由は何ですか？

A2: あまり風味が強いと刺激になり唾液分泌が増えて施術しにくくなったり、
小児は飲み込んでしまう場合もあるので特に味が強くないもの、特に美味しい味でないものを選んでます。

奥山様のコメント:

プロキシット ピンク Fineは金属の補綴物を磨いてもペーストに金属色が出ず艶がなくなることはありませんでした。使用後は艶が出て沈着物がつきにくくなる印象を受けます。患者様からも舌触りがツルツルで気持ちが良いと大変好評です。

Q&Aコーナーサポーター：歯科衛生士 奥山 洋実 様



製品内容

701470	プロキシットピンク Fine	80g×1
701471	プロキシットグリーン Medium	80g×1
701472	プロキシットFフリー グリーン Medium	80g×1
701473	プロキシットブルー Coarse	80g×1
703250	プロキシットピンク Fine 1回パック	1.8g×200
703252	プロキシットブルー Coarse 1回パック	1.8g×200
704113	プロキシットテストパック	1.8g×6

一般の名称：歯面研磨材 / 販売名：プロキシット / 届出番号：13B1X10049IV0046 / 一般医療機器



Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24
TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657

ivoclar.com
info.japan@ivoclar.com