

PrograPrint™ Cure

Unité de polymérisation à DEL haute performance

**RAPIDE ET
UNIVERSEL**



ivoclar
digital®

PrograPrint™ Cure


Pour les matériaux de stratification C&B

PrograPrint Cure se caractérise par un large spectre lumineux et une intensité lumineuse constante. Ainsi, l'appareil convient non seulement pour la polymérisation des matériaux PrograPrint, mais aussi pour le durcissement des matériaux de C&B classiques d'Ivoclar Vivadent (par exemple, SR Nexco®).



Une aide indispensable : le support d'élément PrograPrint Cure

Le support d'élément PrograPrint Cure vous permet de placer vos modèles ou restaurations au niveau approprié dans la chambre de polymérisation de l'unité de polymérisation. Le support d'élément est doté de deux côtés offrant deux différentes options de fixation des tiges. Il peut donc être utilisé aussi bien avec des tiges insérées de manière classique qu'avec des tiges fixées par rétention magnétique.

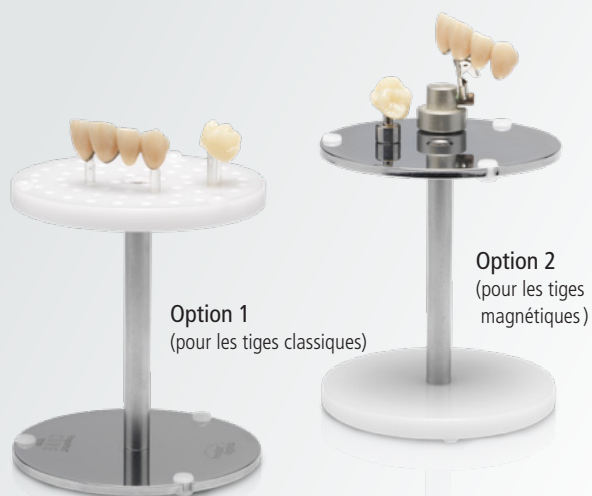

- ▶ **parties réfléchissantes** pour une polymérisation optimale sans formation d'ombre
- ▶ **tube de transport facile à saisir** pour une manipulation et un chargement confortables dans l'appareil de polymérisation
- ▶ **support d'élément doté de trois pieds antidérapants de chaque côté** pour une meilleure stabilité et un bon maintien sur le plateau rotatif de l'appareil
- ▶ **surfaces et matériaux de haute qualité** pour un nettoyage facile et une longue durée de vie

AVANTAGES

- technologie à DEL offrant un large spectre lumineux
- forte intensité lumineuse (274 mW/cm²)
- utilisation facile grâce à l'écran tactile couleur
- chambre de polymérisation spacieuse
- plaque rotative et revêtement réfléchissant à l'intérieur de la chambre pour une distribution optimale de la lumière
- conception moderne et ergonomique
- fenêtre d'observation pour le contrôle visuel



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PrograPrint® Cure

Intensité lumineuse	274 mW/cm ²
Fonctionnement	Affichage graphique et écran tactile
Poids (kg)	17
Dimensions (mm) W x H x D	245 x 440 x 490

Accessoires inclus : support d'élément,
set d'accessoires, support de couronne



Et pour le matériel PrograPrint™

L'unité de photopolymérisation PrograPrint Cure est conçue pour la post-polymérisation des objets qui ont été imprimés avec les matériaux PrograPrint à l'aide du système d'impression PrograPrint PR5 d'Ivoclar Vivadent. Elle est utilisée pour durcir les objets imprimés.

La longueur d'onde des lampes à DEL de la machine est adaptée au matériau pour des résultats de post-polymérisation optimaux. Le revêtement réfléchissant spécial à l'intérieur de la chambre de polymérisation assure une distribution uniforme de la lumière et donc une exposition optimale des éléments imprimés.

La chambre de polymérisation est suffisamment spacieuse pour accueillir les éléments imprimés ainsi que la plateforme de construction PrograPrint PR5. Les programmes de polymérisation sont prédéfinis pour une gamme de matériaux, ce qui assure un niveau élevé de confort d'utilisation. Les utilisateurs peuvent également définir leurs propres programmes de polymérisation pour d'autres matériaux.



L'EXPERTISE NUMÉRIQUE D'UN MÊME FABRICANT

Ivoclar Digital est un partenaire en matière de technologie numérique compétent qui soutient les dentistes et les techniciens dentaires tout au long de la chaîne de traitement numérique. Nous croyons qu'il est important que les procédures soient simples et compréhensibles. La gamme de produits pour le processus de traitement numérique est divisée en quatre domaines :

CONSULTER

IvoSmile™, l'application innovante basée sur la réalité augmentée, facilite le dialogue entre les professionnels des soins dentaires et leurs patients

CONCEVOIR

Des scanners polyvalents, un logiciel de conception intuitif de nos partenaires et des modules complémentaires exclusifs

DÉCIDER

Des matériaux hautes performances tels qu'IPS e.max® – le système tout céramique le plus utilisé au monde⁽¹⁾

PRODUIRE

Des équipements haute technologie pour la production de restaurations esthétiques

→ Connecté à vous

ivoclardigital.com

Pour nous appeler sans frais, composez le 1-800-533-6825 depuis les États-Unis ou le 1-800-263-8182 depuis le Canada.

© 2020 Ivoclar Vivadent, Inc. Ivoclar Vivadent, Ivoclar Digital, IvoSmile, e.max et PrograPrint sont des marques de commerce d'Ivoclar Vivadent, Inc.
748228 Rév. 1 11/2020 13684

États-Unis
175 Pineview Drive
Amherst, New York 14228
716-691-0010
800-533-6825
Téléc. : 716-691-2285
www.ivoclarvivadent.com

Canada
1 - 6600 Dixie Road
Mississauga, Ontario L5T 2Y2
905-670-8499
800-263-8182
Téléc. : 905-670-3102
www.ivoclarvivadent.com

**ivoclar
digital®**